




## UPDATE SISMADAK MENJADI SIDOKAR DAN PERBAIKAN LAINNYA

Update : 27 juli 2022

Langkah-langkah update Title SISMADAK menjadi SIDOKAR dan perbaikan fitur yang lainnya :

1. Login sikars, buka : [akreditasi.kars.or.id](http://akreditasi.kars.or.id) pilih menu SIDOKAR :

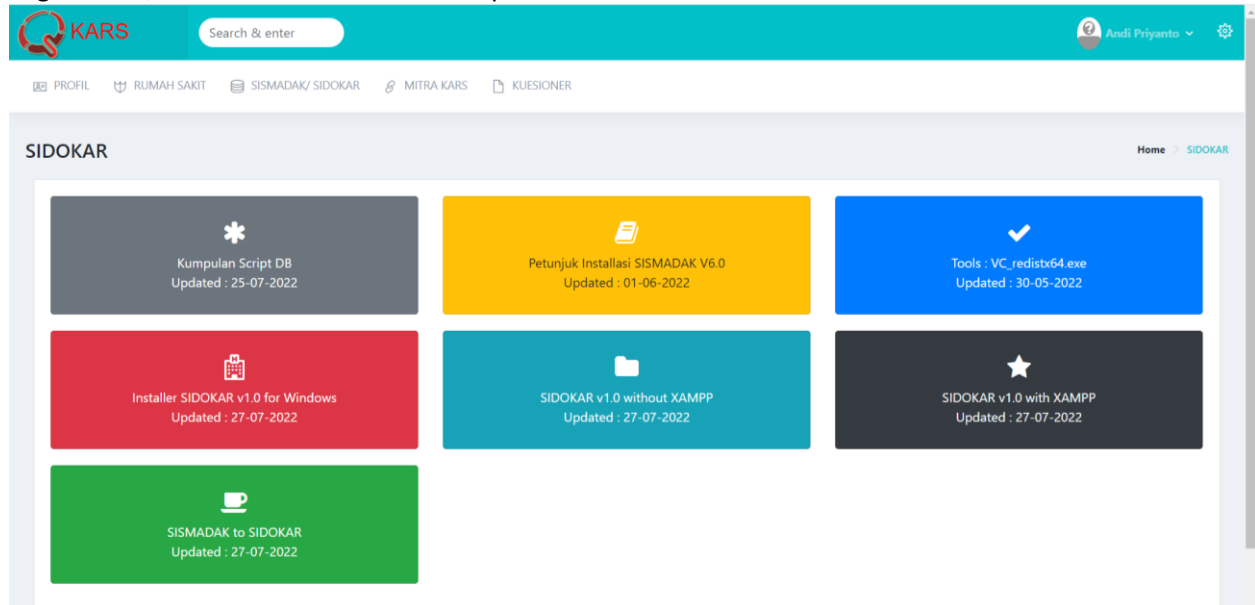


Gambar 1. Menu SIDOKAR

2. Karena sebelumnya kita sudah mempunyai sismadak v6, maka kita unduh **SIDOKAR v1.0 without XAMPP**.




Gambar 2. Unduh SIDOKAR v1.0 without XAMPP

3. Buka file explorer /windows explorer pada server sismadak dan buka folder dimana kita meletakkan sismadak. Misal di C:/xampp/htdocs

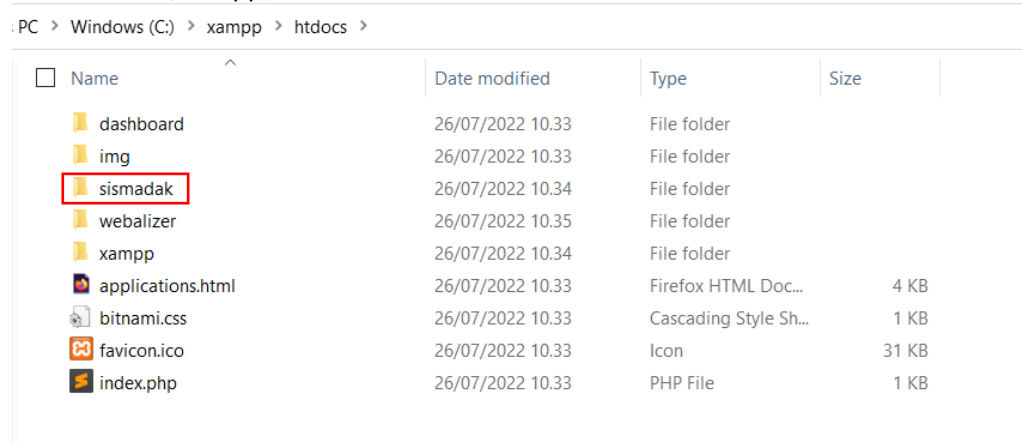

Gambar 3. File Explorer Server

4. Seperti biasa, sebelum kita mulai biasakan melakukan backup. Kita akan melakukan backup folder sismadak dengan cara mengubah nama folder tersebut menjadi sismadak2.  
Caranya : klik kanan pada folder sismadak, pilih rename dan ketik sismadak2.

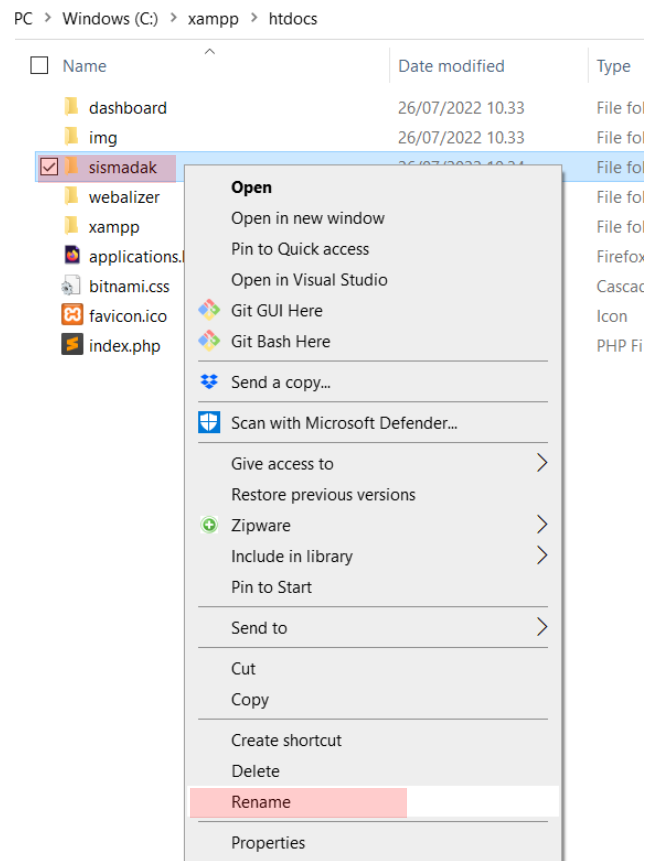


Gambar 4. Rename Sismadak menjadi sismadak2

5. Hasil setelah di rename

PC > Windows (C:) > xampp > htdocs >				
<input type="checkbox"/>	Name	Date modified	Type	Size
	dashboard	26/07/2022 10.33	File folder	
	img	26/07/2022 10.33	File folder	
	sismadak2	26/07/2022 10.34	File folder	
	webalizer	26/07/2022 10.35	File folder	
	xampp	26/07/2022 10.34	File folder	
	applications.html	26/07/2022 10.33	Firefox HTML Doc...	
	bitnami.css	26/07/2022 10.33	Cascading Style Sh...	
	favicon.ico	26/07/2022 10.33	Icon	
	index.php	26/07/2022 10.33	PHP File	

Gambar 5. Hasil setelah direname menjadi sismadak2

## 6. Extract file yang sudah didownload pada langkah 2

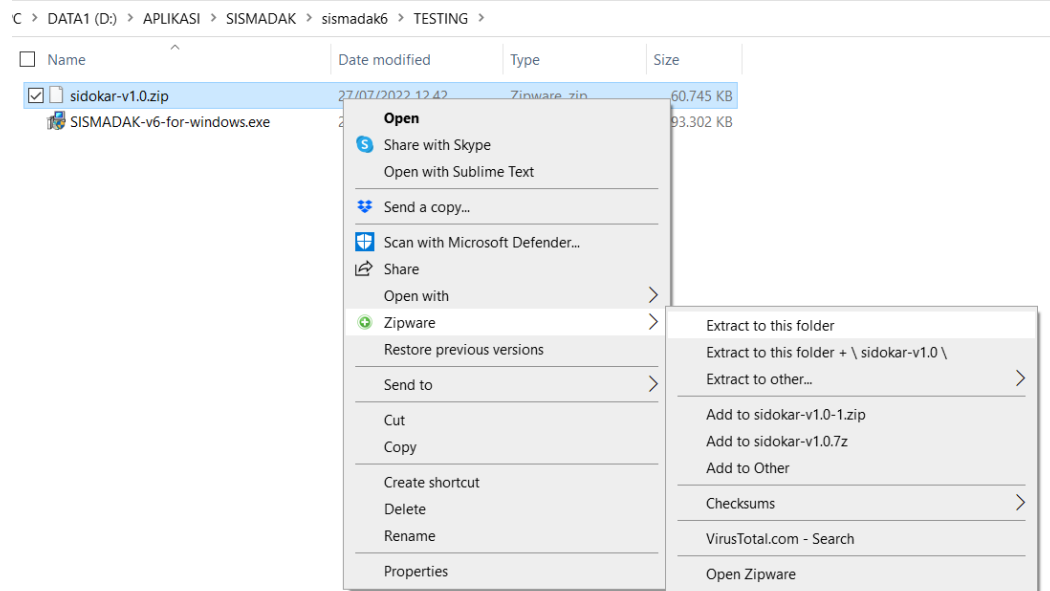

Gambar 6. Extract File sidokar-v1.0.zip

## 7. Hasil extract dari langkah No. 6

DATA1 (D:) > APLIKASI > SISMAK > sismadak6 > TESTING				
Name	Date modified	Type	Size	
sidokar	18/07/2022 10.13	File folder		
sidokar-v1.0.zip	27/07/2022 12.42	Zipware .zip	60.745 KB	
SISMAK-v6-for-windows.exe	26/07/2022 10.31	Application	293.302 KB	

Gambar 7. Hasil extract berupa folder sidokar

## 8. Copy folder sidokar di web root (C:/xampp/htdocs)

C > Windows (C:) > xampp > htdocs				
Name	Date modified	Type	Size	
dashboard	26/07/2022 10.33	File folder		
img	26/07/2022 10.33	File folder		
sidokar	27/07/2022 12.50	File folder		
sismadak2	26/07/2022 10.34	File folder		
webalizer	26/07/2022 10.35	File folder		
xampp	26/07/2022 10.34	File folder		
applications.html	26/07/2022 10.33	Firefox HTML Doc...	4 KB	
bitnami.css	26/07/2022 10.33	Cascading Style Sh...	1 KB	
favicon.ico	26/07/2022 10.33	Icon	31 KB	
index.php	26/07/2022 10.33	PHP File	1 KB	


Gambar 8. Hasil copy sidokar ke web root

9. Selanjutnya rename sidokar menjadi sismadak.

Q : Kenapa folder sidokar harus diubah menjadi sismadak ?

A : kita asumsikan xampp yang kita gunakan dari installer, dimana sudah disetting home dari web server ini mengarah ke **C:/xampp/htdocs/sismadak**, Jadi ketika kita akses localhost dari server halaman yang terbuka langsung mengarah ke folder **C:/xampp/htdocs/sismadak**.


Di atas adalah penjelasan kenapa folder sidokar harus diubah menjadi sismadak.

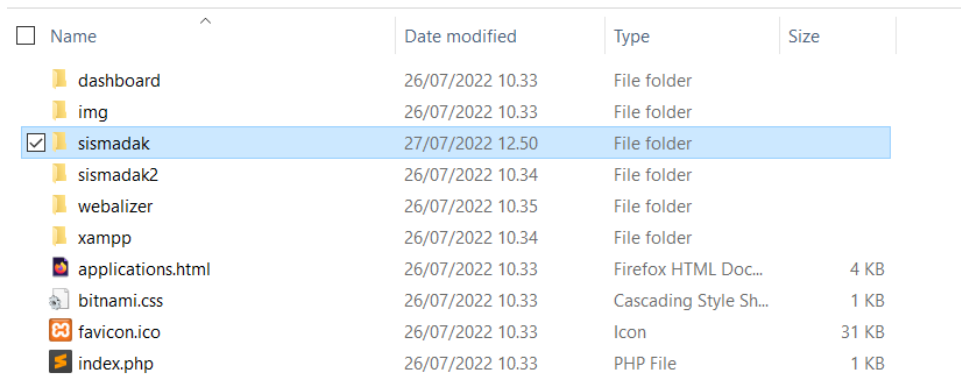

Name	Date modified	Type	Size
dashboard	26/07/2022 10.33	File folder	
img	26/07/2022 10.33	File folder	
<input checked="" type="checkbox"/> sismadak	27/07/2022 12.50	File folder	
sismadak2	26/07/2022 10.34	File folder	
webalizer	26/07/2022 10.35	File folder	
xampp	26/07/2022 10.34	File folder	
applications.html	26/07/2022 10.33	Firefox HTML Doc...	4 KB
bitnami.css	26/07/2022 10.33	Cascading Style Sh...	1 KB
favicon.ico	26/07/2022 10.33	Icon	31 KB
index.php	26/07/2022 10.33	PHP File	1 KB

Gambar 9. Tampilan setelah folder sidokar direname menjadi sismadak


10. Selanjutnya copy file config.php yang berada di **C:/xampp/htdocs/sismadak2/lib/inc** ke **C:/xampp/htdocs/sismadak/lib/inc**

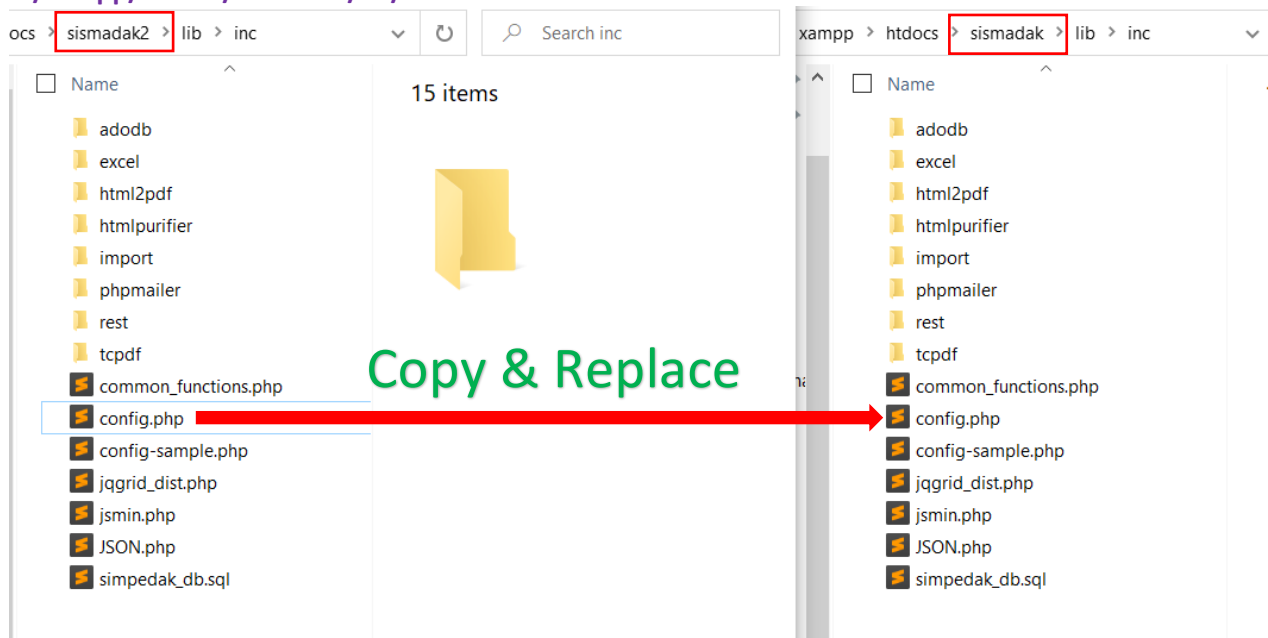

Gambar 10. Copy and replace file config.php


11. Selanjutnya copy dan replace folder uploads yang berada di **C:/xampp/htdocs/sismadak2** ke **C:/xampp/htdocs/sismadak**.

Folder uploads berisi file-file dokumen akreditasi yang sudah diupload.

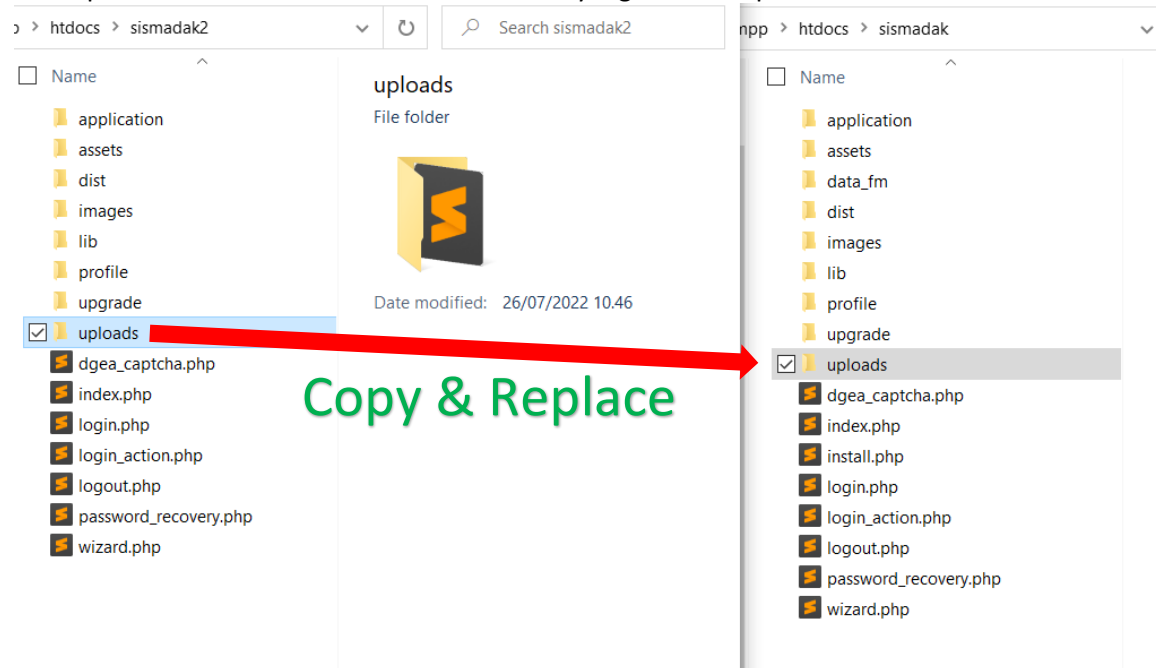

Gambar 11. Copy replace folder uploads


12. Kita coba dengan akses : localhost (dari server)

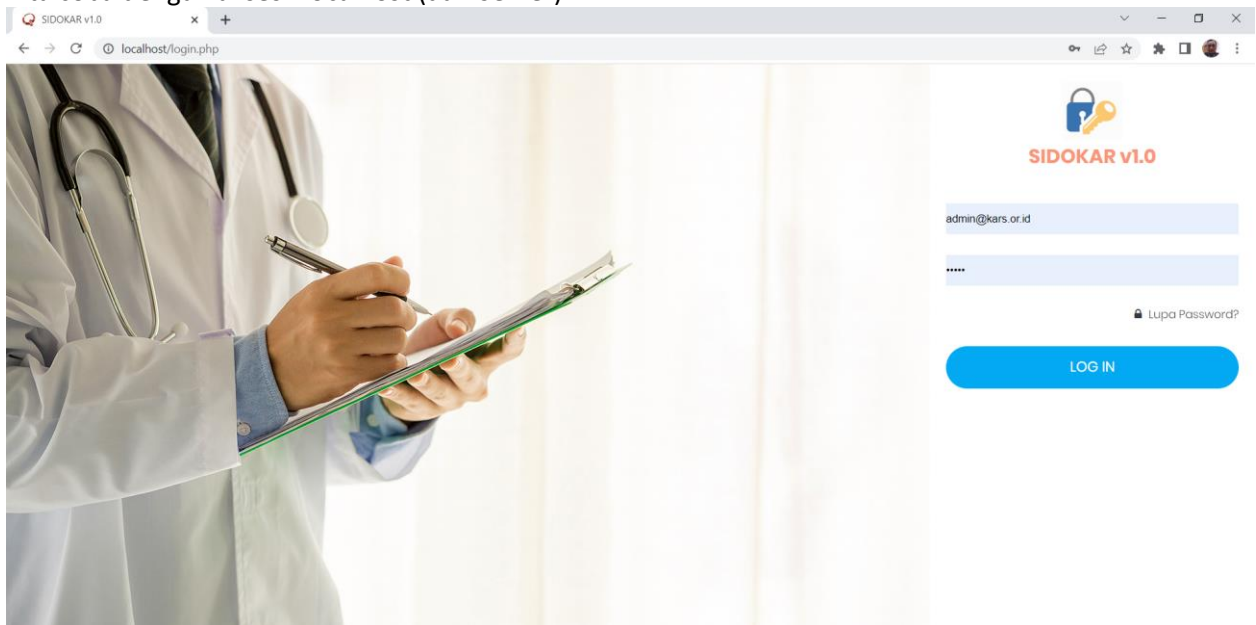

Gambar 12. Akses SIDOKAR

### 13. Login ke SIDOKAR.


Tampilan utama tidak ada yang berubah hanya title bar di atas sudah berubah menjadi SIDOKAR v1.0

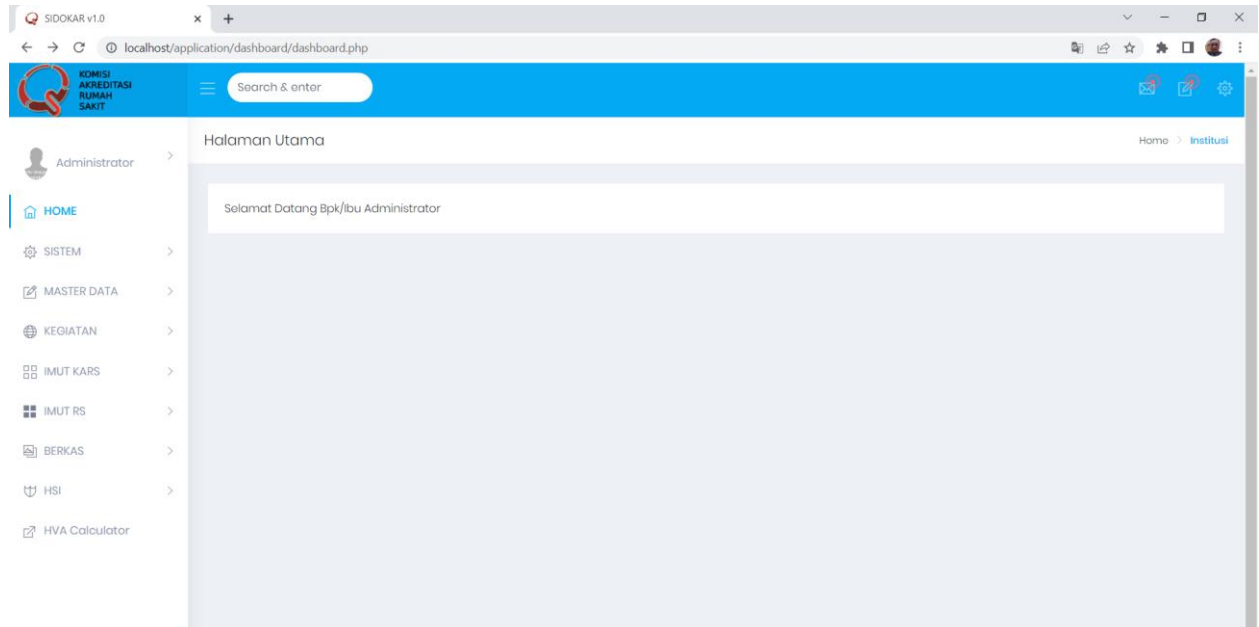

Gambar 13. Tampilan setelah login

### 14. File manager


Dalam pengaturan hak akses File manager pada kolom **User directory** dapat di kosongkan.

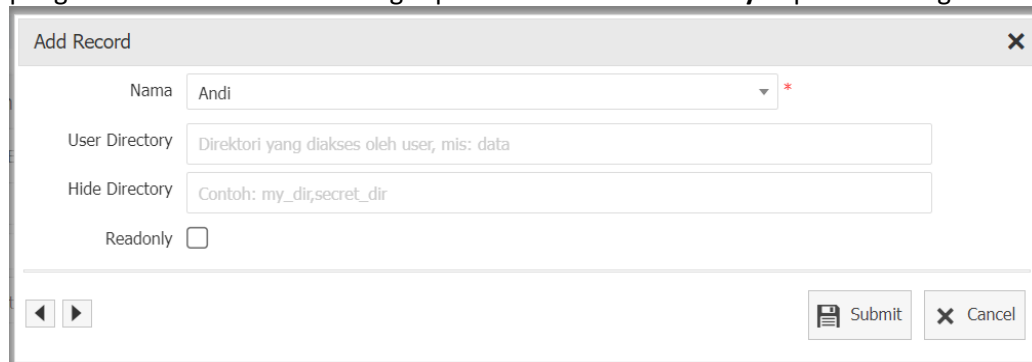

Gambar 14. Menambah hak akses File manager user


- Apabila User Directory dikosongkan, maka file yang diupload akan masuk ke : **C:\xampp\htdocs\sismadak\uploads\1234567\fm** dan otomatis dapat melihat folder yang ada didalamnya. \*1234567 = Kode Rumah sakit
  - Apabila User Directory diisi (misal : foto), maka di dalam folder **..\uploads\1234567\fm** akan terbentuk folder seperti yang diisikan (**..\uploads\1234567\fm\foto**) dan user tersebut hanya bisa melihat file dan folder yang ada di dalam folder **foto** yang dibuat tersebut.
15. Apabila sebelumnya sudah mengatur User directory dan sudah ada file yang diupload, maka copy file yang diupload ke folder **C:\xampp\htdocs\sismadak\uploads\1234567\fm** dan atur ulang user directory nya.

16. Selanjutnya jalankan script2 yang sudah diunggah di SIKARS :

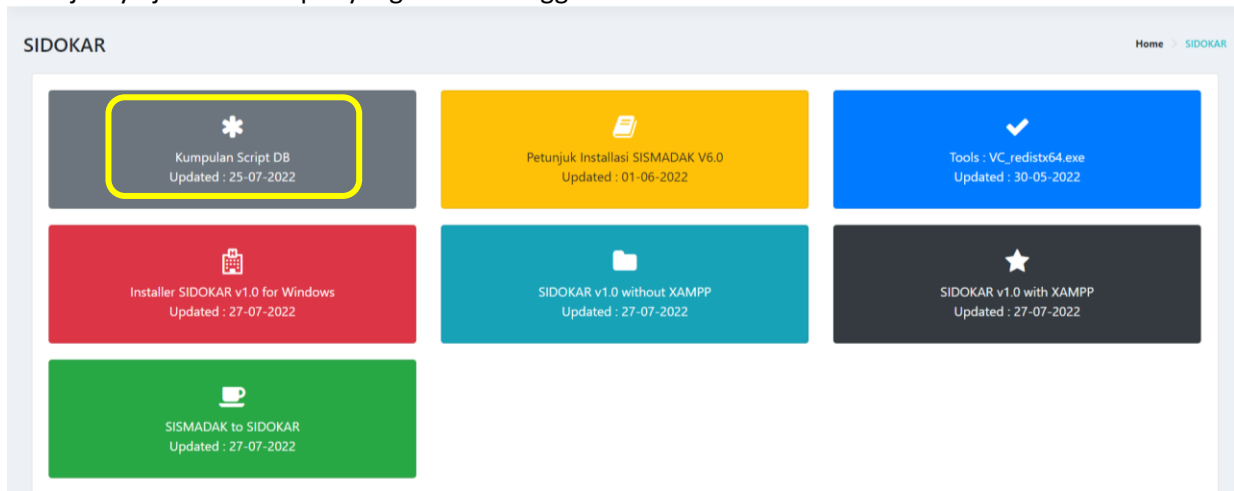

Gambar 15. Script query database yang harus dijalankan

17. Menu Script DB

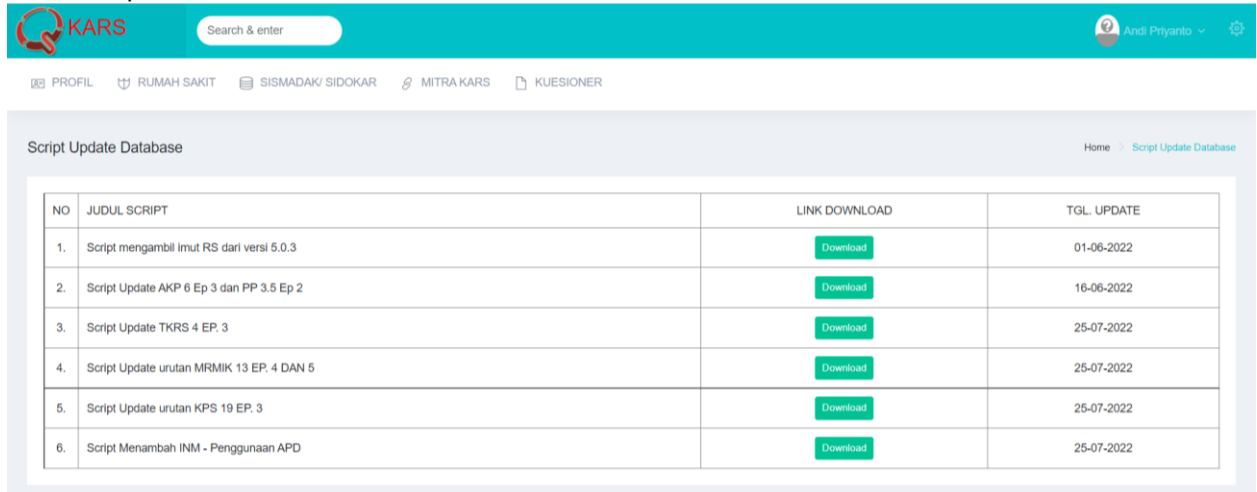

Gambar 16. Download script query DB  
Silahkan download dan jalankan script di database SIDOKAR.